

rollbuddy®

Indoor Rollator



GMN:
8720726413RB013J

V1.0NL/EN

NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual

LWM.
Life is about moving

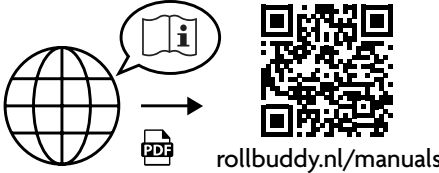


Fig. 1

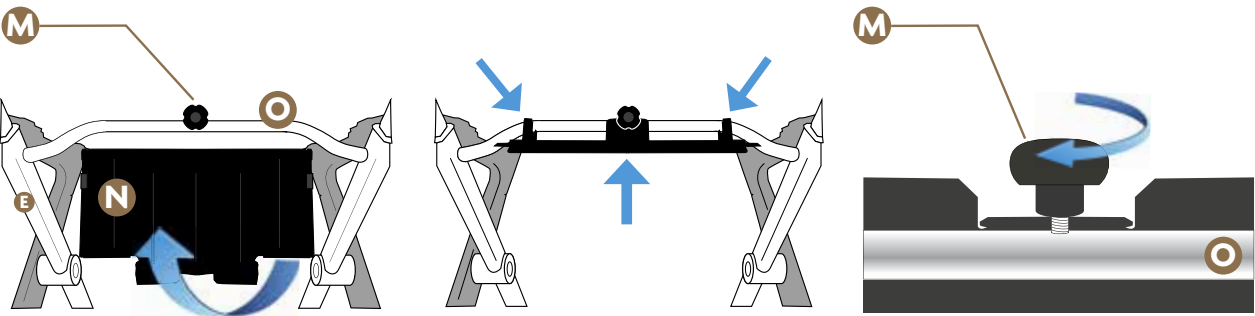
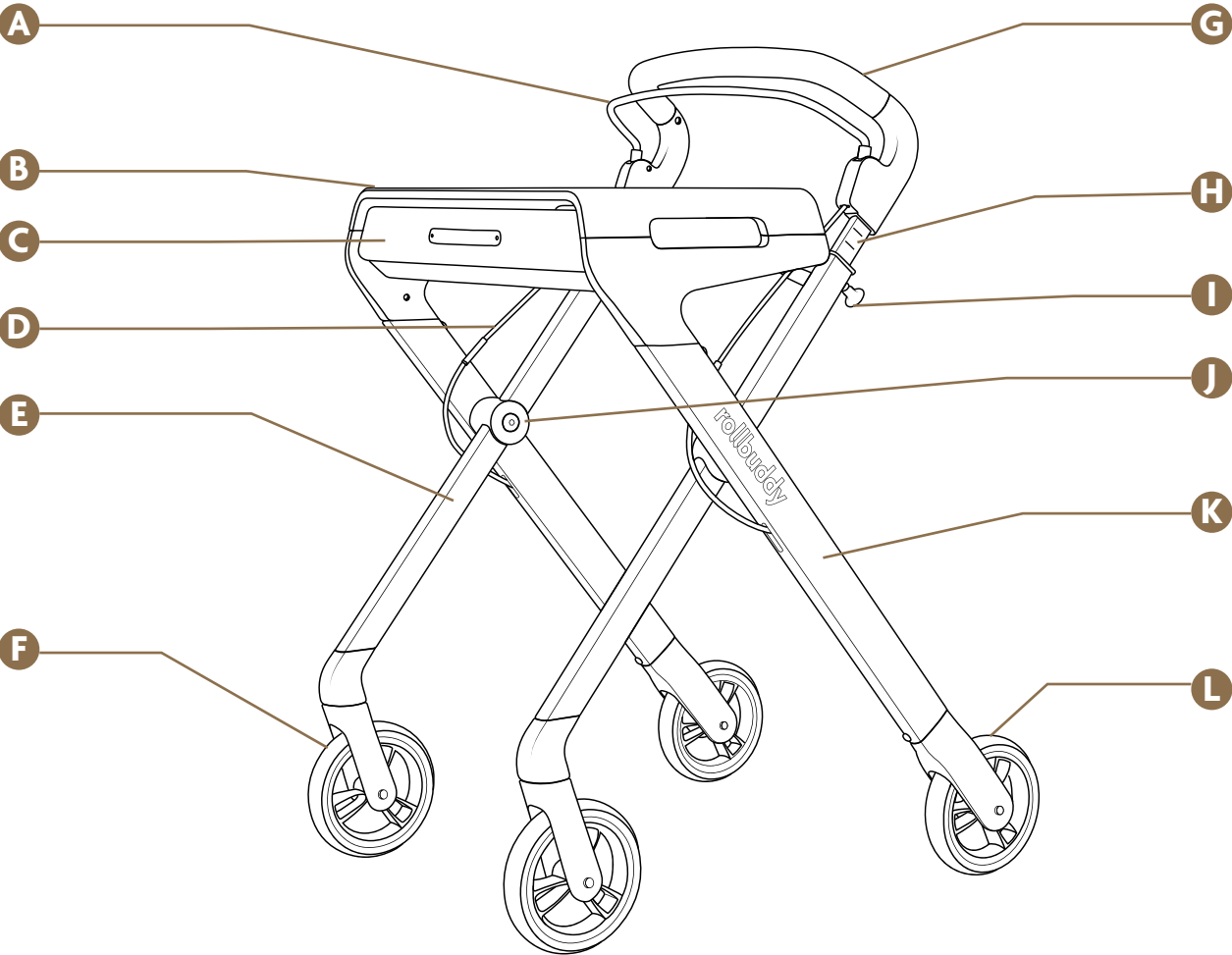


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1:

- A Rembeugel
- B Afneembaar dienblad
- C Lade
- D Remkabel
- E Binnen frame
- F Zwenkwiel
- G Comfort foam handvat
- H Hoogte indicator
- I Stelknop
- J Centraal scharnierpunt
- K Buiten frame
- L Remwiel
- M Schroefknop
- N Metalen verbindingssplaat
- O Ronde verbindingssplaat

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Rollbuddy indoor rollator. De Rollbuddy is een medisch hulpmiddel. Dit houdt in dat de Rollbuddy volgens Europese normen is ontwikkeld en getest. Lees voor een optimaal en veilig gebruik de handleiding zorgvuldig door voordat u de Rollbuddy in gebruik neemt.

Algemeen:

Rollbuddy helpt met onafhankelijk staan en lopen, en vergemakkelijkt dagelijkse handelingen. De rollator is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. De lade en het dienblad kunnen worden gebruikt voor het opbergen en verplaatsen van klein huishoudelijk gerei.

Het gebruik van de Rollbuddy dient altijd in overleg met een daartoe bevoegde adviseur, arts of fysiotherapeut afgestemd te worden.

⚠ Rollbuddy is niet geschikt bij:

- grote problemen met evenwicht
- onvoldoende spierkracht om zelfstandig (op) te staan of te lopen.
- onvoldoende spierkracht om de handvatten goed vast te houden.

⚠ Het is niet toegestaan om op de Rollbuddy te staan, zitten of liggen. Tevens is het niet toegestaan de rollator buitenshuis te gebruiken.

⚠ Veiligheidsvoorschriften:

LIAMDevelopments BV draagt geen verantwoordelijkheid voor schade en/of verwonding door het onjuist opvolgen van de voorschriften.

- Maximale belasting handgrepen: 110 kg.
- Maximale belasting dienblad/lade: 3 kg.
- Uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik op een vlakke, horizontale ondergrond.

⚠ Vermijd ongelukken:

- Gebruik de Rollbuddy uitsluitend waarvoor deze is bedoeld.
- Gebruik de Rollbuddy alleen in goede technische staat.
- Maak geen technische aanpassingen aan de constructie van de Rollbuddy.
- De Rollbuddy uitsluitend gebruiken op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Tijdens gebruik van de Rollbuddy dienen alle wielen altijd in contact te zijn met de vloer.
- Indien men de Rollbuddy in stilstand positie gebruikt, dient hij altijd op de handrem te staan.

Verpakking:

De Rollbuddy wordt ingeklapt in de doos geleverd om ruimte te besparen en eventuele kans op schade tijdens transport te beperken.

Inhoud verpakking:

- Het ingeklapte frame van de Rollbuddy
- Een houten serveerblad
- De lade voorzien van een imitatie lederen handgreep
- Gebruiksaanwijzing

Montage (Fig 2-4):

Het frame **E**, **K** van de Rollbuddy bestaat uit 2 aluminium delen die door middel van scharnieren **I** en een metalen verbindingssplaat **N** met elkaar verbonden zijn. Wanneer de Rollbuddy uit de doos is gehaald, hangt de plaat tussen de 2 buitenste frame delen (Fig. 2).

Zet de metalen verbindingssplaat **N** vast door middel van de schroefknop **M** aan de ronde verbindingssplaat **O** van het binnenframe (Fig. 3, 4).

Hoogte instellen:

Let op: Hoogtebepaling altijd in overleg met de adviseur. Schuif de handgreep **G** op de gewenste hoogte. Let erop dat de linker- en rechterkant van de hoogte indicators **H**, op dezelfde stand staan. Draai nu de stelknoppen **I** handvast aan.

Lade / serveerblad:

Leg de lade **C** op de metalen plaat. Zorg dat de lade volledig op de plaat rust, en onder de geleiders aan weerszijden van de metalen plaat valt.

Het afneembare dienblad **B** kan nu op de kunststof ontvangstnokken van het frame worden gelegd.

Remsysteem (fig. 5):

De Rollbuddy is standaard uitgerust met een automatisch remsysteem. Dit houdt in dat de parkeerrem geactiveerd is wanneer de rembeugel **A** in de neutrale stand **1** staat.



Door de rembeugel geleidelijk in te knijpen **2**, vermindert de remweerstand en kan de Rollbuddy gaan rijden. Zodra de rembeugel losgelaten wordt, is de parkeerrem weer automatisch geactiveerd.

Met de rembeugel in de onderste positie **3** kunnen de wielen volledig vrij bewegen.

Onderhoud en reinigen:

Reinig de Rollbuddy regelmatig en houd hem schoon. Vuil en stof kan met een vochtige doek worden verwijderd. Gebruik eventueel een niet-corrosief wasmiddel tegen vastzittend vuil. Gebruik geen schuur- of bleekmiddel. Dit kan schade of verkleuringen veroorzaken. Droog alle delen met een zachte, schone doek. Reinig de wielen met warm water en eventueel een zacht wasmiddel. Droog ze af met een schone doek.

Gebruik nooit siliconenhoudende spray of -olie om bewegende delen te smeren of de rollator te reinigen.

Belasting, maten en technische specificaties:

Max. belasting handgreep	110 kg
Max. draaggewicht dienblad	10 kg
Max. vulgewicht lade	3 kg
Totaalgewicht	5,2 kg
Afmeting ingeklapt	28x96,5x55,5 cm (LxHxB)
Afmeting uitgekapt	71x84/97x55,5 cm (LxHxB)
Hoogte handvat (variabel)	85 - 95 cm
Remsysteem	Automatisch
Wielen	ø 15 cm
Kleuren	Aluminium/zwart/Koper
Artikelnummers/SKU	RB01ALU/RB01BLK/RB01CPR
BASIC UDI/GMN	8720726413RB013J
GTIN/UDI DI (ALUMINIUM)	8720726413008
GTIN/UDI DI (BLACK)	8720726413015
GTIN/UDI DI (COPPER)	8720726413022

Garantie:

LIAM Developments BV geeft 2 jaar garantie op productie- en montagefouten. De garantie vervalt wanneer de rollator niet volgens de voorschriften in dit document is gebruikt. Neem contact op met LIAM Developments BV wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie.

Rollbuddy® is een geregistreerd handelsmerk van:



LIAM Developments BV
Jachtwagen 29
3897AM Zeewolde NL

T: 0031 (0)36 53 53 580
info@liamdevelopments.nl

© 2023 LIAM Developments BV. Alle rechten voorbehouden.

Voor meer informatie, bezoek: www.rollbuddy.nl



EN User manual

Fig. 1:

- A** Brake lever
- B** Removable serving tray
- C** Drawer
- D** Brake cable
- E** Inner frame
- F** Swivel wheel
- G** Comfort foam handle bar
- H** Height indicator
- I** Adjustment knob
- J** Central hinge
- K** Outer frame
- L** Brake wheel
- M** Screw knob
- N** Metal connection plate
- O** Round connection tube

Thank you for purchasing the Rollbuddy indoor rollator. The Rollbuddy is a medical device, this means that the Rollbuddy has been developed and tested according to European standards. Before use, read the manual carefully for optimal and safe use.

General:

Rollbuddy assists standing and walking independently, and facilitates daily activities. The rollator is intended for indoor use only. The drawer and serving tray can be used to store and transport small household utensils.

The use of the Rollbuddy should always be coordinated in consultation with an authorized advisor, doctor or physiotherapist.

⚠ Rollbuddy is not suitable when the user has:

- Major problems holding balance
- Insufficient muscle strength to stand up or walk independently.
- Insufficient muscle strength to firmly grab the handle bar.

⚠ Do not stand, sit or lie on the Rollbuddy. It is not allowed to use the rollator outdoors.

⚠ Safety instructions:

LIAM Developments BV bears no responsibility for damage and/or injury due to incorrectly following the instructions.

- Maximum load on handle bar: 110 kg.
- Maximum tray/drawer load: 3 kg.
- For indoor use only on a flat, horizontal floor.

⚠ Avoid accidents:

- Only for intended use
- Use the Rollbuddy only in optimal technical condition.
- Do not alter or make technical adjustments to the construction.
- Use the Rollbuddy only on a smooth and flat surface.
- All wheels must remain in constant contact with the floor.
- When in stationary position, always apply the automatic handbrake.

Packaging:

The Rollbuddy comes folded in the box to save space and limit any risk of damage during transport.

Package contents:

- The folded frame of the Rollbuddy
- A plywood serving tray
- A drawer, with imitation leather handle
- User manual

Assembly (Fig 2-4):

The frame of the Rollbuddy **E**, **K** consists of 2 aluminum legs that are connected to each other by a central hinge **I** and a metal connecting plate **N**. When the Rollbuddy is removed from the packaging, the plate hangs between the 2 outer frame parts (Fig. 2).

Secure the metal connection plate **N** to the round connection tube **O** of the inner frame by means of the screw knob **M** (Fig. 3, 4).

Adjusting height:

Note: Always determine the height in consultation with the adviser. Slide the handle bar **G** to the desired height. Make sure that the left and right side of the height indicators **H** are on the same position. Now tighten the adjustment knobs **I** handproof.

Drawer / serving tray:

Place the drawer **C** on the metal connection plate **N**. Make sure the drawer is resting completely on the metal plate, and fits snugly under the conductors on either side of the metal plate.

The removable serving tray **B** can now be placed on the reception nooks of the frame.

Braking system (fig.5):

The Rollbuddy is equipped with an automatic braking system (standard factory setting). This means that the parking brake is always activated when the brake lever  is in the neutral position .

Fig. 5



By gradually squeezing the brake lever, braking resistance is reduced and the Rollbuddy can start moving . As soon as the brake lever is released, the parking brake is automatically reactivated.

With the brake lever in the lower position , the wheels are completely free to move.

Maintenance and cleaning:

Clean the Rollbuddy regularly. Dirt and dust can be removed with a damp cloth. If necessary, use a non-corrosive detergent against stubborn dirt. Do not use abrasives or bleach, this can cause damage or discoloration. Dry all parts with a soft, clean cloth. Clean the wheels with warm water and possibly a mild detergent. Dry them with a clean cloth.

Never use silicone spray to lubricate moving parts or to clean the rollator.

Load, measurements and technical specifications:

Max. load handle bar	110 kg
Max. carrying weight serving tray	10 kg
Max. load capacity drawer	3 kg
Total weight	5,2 kg
Folded dimensions	28x96,5x55,5 cm (LxHxB)
Dimensions folded out	71x84/97x55,5 cm (LxHxB)
Handle bar height (variable)	85 - 95 cm
Braking system	Automatisch
Wheels	ø 15 cm
Available colours	Aluminium/zwart/Koper
Article numbers/SKU	RB01ALU/RB01BLK/RB01CPR
BASIC UDI/GMN	8720726413RB01J
GTIN/UDI DI (ALUMINIUM)	8720726413008
GTIN/UDI DI (BLACK)	8720726413015
GTIN/UDI DI (COPPER)	8720726413022

Warranty:

LIAM Developments BV offers a 2-year warranty on production and assembly defects. The warranty expires when the indoor walker is not used according to the regulations specified in this document. For warranty claims, please contact LIAM Developments BV.

Rollbuddy® is a registered trademark of:



LIAM Developments BV
Jachtwagen 29
3897AM Zeewolde NL

T: 0031 (0)36 53 53 580
info@liamdevelopments.nl

© 2023 LIAM Developments BV. All rights reserved.

For more information, visit: www.rollbuddy.nl





rollbuddy[®]
www.rollbuddy.nl

LAM.
Life is about moving
