



Creating balance in healthcare



Viking M, L, XL Tillift



Viking M, L, XL



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

Viking M, L en XL

De Viking is in drie modellen verkrijgbaar, vanaf de supersterke XL tot het kleinste model de Viking M. Kenmerkend voor alle modellen is de uitstekende verhouding tussen het lage gebruiksgewicht en de hoge tilcapaciteit. Doordat de Viking van aluminium gemaakt is, wordt uw lift een stuk lichter.

In combinatie met Liko's uitgebreide assortiment accessoires lost de Viking verschillende tilproblemen op. Liko's tilbanden en accessoires zijn verkrijgbaar in een reeks verschillende varianten voor het lichtere tilwerk en voor gebruikers met een maximaal gewicht van 300 kg.

	Viking M	Viking L	Viking XL
Maximale belasting	205 kg	250 kg	300 kg
Maximale tilhoogte	181 cm	179 cm	182 cm
Minimale tilhoogte	46 cm	45 cm	49 cm
Interval hoogte	125 cm	134 cm	133 cm
Maximale hoogte	198 cm	200 cm	208 cm
Lengte	133 cm	135 cm	135 cm
Breedte	63 - 104 cm	66 - 96 cm	75 - 116 cm
Eigen gewicht (incl accu's)	30 kg	40 kg	43 kg

Aluminium, het groene metaal

Het is geen toeval dat de Viking-serie is vervaardigd van aluminium. Er is weliswaar vrij veel energie nodig om aluminium te produceren, maar wanneer dit metaal eenmaal is opgewerkt, roest het niet weg. Het lage gewicht van het materiaal zorgt ervoor dat de liften licht rijden en werken, met minimale belasting van rug en schouders. Ook de voordelen ten aanzien van het milieu zijn er niet minder om.

Aluminium kan met een relatief laag energieverbruik zo goed als onbeperkt worden gerecycled.

Voor het tillen van een persoon vormen niet alleen de technische hulpmiddelen een vereiste, maar vooral ook begrip ten aanzien van medische complicaties. Liko is specialist op het gebied van tillen en verplaatsen van mindervalide personen.



Viking M



Viking L



Viking XL

2102040015

Viking M Tillift

2102040015

Viking M Tillift

De Viking M is de meest gebruikte lift. Deze optimale, verrijdbare lift heeft een tiptop uitrusting en is geschikt voor de in de meest praktijk voorkomende tilsituaties. Ondanks het lage gewicht is de Viking M toch in staat maar liefst 205 kg te tillen.

- Vervaardigd van aluminium: mooi, duurzaam en milieuvriendelijk.
- Eigen gewicht is 35 kg, eenvoudig en handig te verrijden.
- Kan in nauwe toiletten worden gebruikt.
- Maximale belasting 205 kg.
- Perfecte all-round lift voor veeleisend werk en wisselende behoeften.
- Met armsteunen.
- Hulpmiddel voor looptraining tijdens revalidatie.





Maximale belasting 205 kg

2102040015

Viking M Tillift

Technische specificaties

- Tilsnelheid 3,5 cm/s onbelast
- Accu's 2 stuks 12V, 2,9 Ah oplaadbare accu's (gelaccu's). Nieuwe accu's zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.
- Lader Ingebouwde lader 100-230V, max. 400mA
- Motor mast 24V 6A, permanent magnetische motor met een mechanisch veiligheidssysteem bestaande uit een trekbeveiliging en een veiligheidsmoer
- Motor basis 24V 3,5A, permanent mechanisch
- Materiaal Aluminium
- Noodhandbediening Mechanisch en elektrisch
- Wielen Voorwielen: 7,5 cm dubbele rol
Achterwielen: 10 cm enkele rol met rem
- Intermittent bedrijf Int. Op 10/90, actief bedrijf max. 2 min. Van een tijd van 100 mag actieve tijd 10 bedragen, echter max. 2 min.
- Eigen gewicht 35 kg
- Max. belasting 205 kg

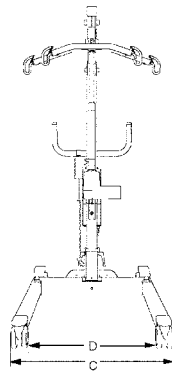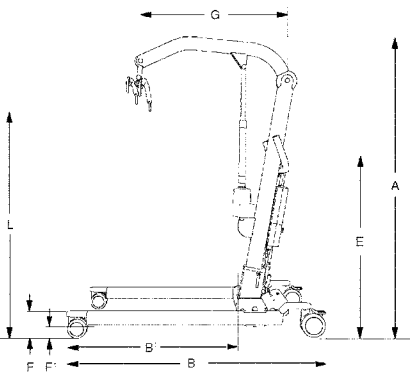

Art.nr.	Art. omschrijving	Max. belasting	Lengte		Afmeting		B	B ¹	C	D	E	F [*]	F ¹	G	Gewicht		
			Max.	Min.	A [*] max.	A [*] min.									Totaal	Deel	Draaicirkel
2102040015	Viking M	205	181	46	198	134	133	87	63-104	52-93	106/101/96	11	4	90	35	18	140

Capaciteit en gewicht in kg Maten in cm.

* 14 cm is standaard. 11,5 cm geldt voor wieldiameter 7,5 cm voor.



2102040004

Viking L Tillift

2102040004

Viking L Tillift

De Viking L is in verhouding tot haar grote tilcapaciteit een bijzonder handige lift en geschikt voor de meest voorkomende normale tilbehoeften, en voor de meeste zwaardere gebruikers.

- Vervaardigd van aluminium: mooi, duurzaam en milieuvriendelijk.
- Eigen gewicht is 40 kg, eenvoudig en licht in gebruik.
- Maximale belasting 250 kg.

- Geschikt voor veeleisende tilsituaties, ook bij tillen vanaf de grond.
- Kan met armsteunen worden uitgerust.
- Het assortiment omvat speciale tilhulpstukken die zijn ontwikkeld voor looptraining tijdens revalidatie.
- Grote, lichtlopende wielen.

De Liko Original Highback en Universal tiljuk 670 Twin, voor extra ruimte voor schouders en buik maken het mogelijk vanaf vloerniveau te tillen.

Maximale belasting 250 kg





2102040004

Viking L Tillift

Technische specificaties

- Tilsnelheid 3,5 cm/s onbelast
- Accu's 2 stuks 12V, 2,9Ah oplaadbare accu's (gelaccu). Nieuwe accu's zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.
- Lader Ingebouwde lader 100-230V, max. 400mA
- Motor mast 24V 6A, permanent magnetische motor met een mechanisch veiligheidssysteem bestaande uit een trekbeveiliging en een veiligheidsmoer
- Motor basis 24V 3,5A, permanent mechanisch
- Materiaal Aluminium
- Noodhandbediening Mechanisch en elektrisch
- Wielen Voorwielen: standaard 10 cm dubbele rol
Alternatief: 7,5 cm dubbele rol
achterwielen: standaard 12,5 cm dubbele rol met rem
Alternatief: 10 cm enkele rol met rem
- Intermittent bedrijf Int. Op 10/90, actief bedrijf max. 2 min. Van een tijd van 100 mag actieve tijd 10 bedragen, echter max. 2 min.
- Eigen gewicht 40 kg
- Max. belasting 250 kg

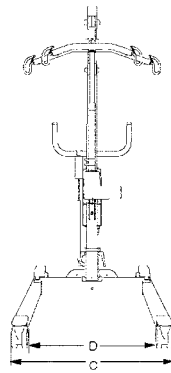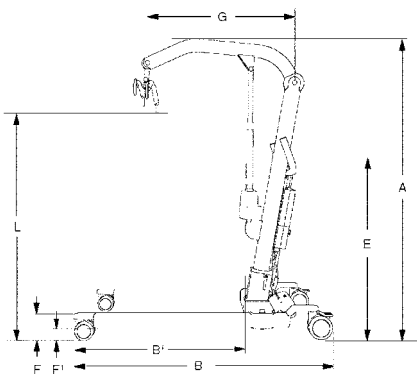

Art.nr.	Art. omschrijving	Max. belasting	Lengte		Afmeting		B	B'	C	D	E	F	F'	G	Gewicht		
			Max.	Min.	A' max.	A' min.									Totaal	Deel	Draaicirkel
2102040004	Viking L	250	179	45	200	136	135	90	66-96	55-95	106	14/11,5	4,5	90	40	22	142

Capaciteit en gewicht in kg. Maten in cm.

* 14 cm is standaard. 11,5 cm geldt voor wieldiameter 7,5 cm voor.

Standaard grote, lichtlopende wielen.



2102040013 Viking XL Tillift

2102040013 Viking XL Tillift

De Viking XL is hoofdzakelijk ontwikkeld voor zware cliënten, maar is uiteraard ook geschikt voor het lichtere werk.

- Vervaardigd van aluminium: mooi, duurzaam en milieuvriendelijk.
- Eigen gewicht is 43 kg, eenvoudig en licht in gebruik.

- Maximale belasting 300 kg.
- Geschikt voor veeleisende tilsituaties, ook bij tillen vanaf de grond.
- Met armsteunen en een Liko tilbroek is de Viking perfect geschikt als looptrainer.
- Met een Flexo stretcher en een balansleveller kunnen zelfs de zwaarste mensen horizontaal worden getild.





2102040013

Viking XL Tillift

Technische specificaties

• Tilsnelheid	3,5 cm/s onbelast	• Noodbediening	Mechanisch en elektrisch
• Accu's	2 stuks 12V, 2,9Ah oplaadbare accu's, (gelaccu's). Nieuwe accu's zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.	• Wielen	Voorwielen: standaard 10 cm dubbele rol alternatief: 7,5 cm dubbele rol achterwielen: standaard 12,5 cm dubbele rol met rem alternatief: 10 cm enkele rol met rem
• Lader	Ingebouwde lader 100-230V, max 400mA	• Intermittent bedrijf	Int. Op 10/90, actief bedrijf max. 2 min. Van een tijd van 100 mag actieve tijd 10 bedragen, echter max. 2 min.
• Motor mast	24V 6A, permanent magnetische motor met een mechanisch veiligheidssysteem bestaande uit een trekbeveiliging en een veiligheidsmoer	• Eigen gewicht	43 kg
• Motor basis	24V 3,5A, permanent mechanisch	• Max. belasting	300 kg
• Materiaal	Aluminium		

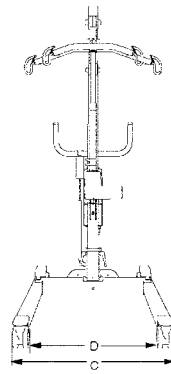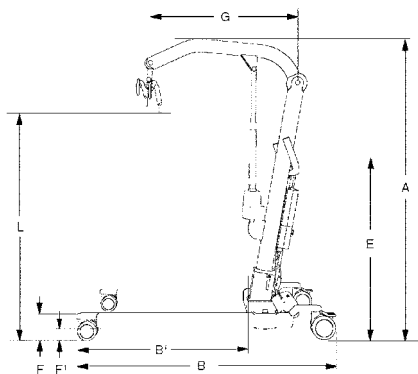

Art.nr.	Art. omschrijving	Max. belasting	Lengte		Afmeting		B	B'	C	D	E	F	F'	G	Gewicht		
			Max.	Min.	A' max.	A' min.									Totaal	Deel	Draaicirkel
2102040013	Viking XL	300	182	49	208	152	135	96	75-116	63-103	105	14/11,5	4,5	90	43	21	152

Capaciteit en gewicht in kg. Maten in cm.
 * 14 cm is standaard. 11,5 cm geldt voor wieldiameter 7,5 cm voor.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

