



WESSELING BV

made in Holland since 1958



CE

BOBATH ELITE

Als het een maatje meer mag zijn

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| Bobath Elite, groots in formaat en mogelijkheden..... | 1 |
| Productkenmerken Bobath Elite..... | 2 |
| Bobath 1 Elite..... | 3 |
| Bobath 2 Elite Head Section | 4 |
| Bobath 2 Elite Back Section | 5 |
| Opties & Accessoires | 6 |
| Kleuren & leersoorten | 8 |

Bobath Elite, groots in formaat en mogelijkheden.

De Bobath tafel staat algemeen bekend als een grote behandeltafel. De naam is niets minder dan de achternamen van de bedenkers van het Bobath Concept. Een concept of therapie waarbij veel bewogen dient te worden en waarvoor de dus een groot behandeloppervlak wenselijk is. Met de keuze uit 3 verschillende modellen en 4 verschillende maten kunnen we altijd een tafel leveren die bij uw behandeling past.

Het schaarframe zorgt ondanks de afmeting voor een minimale voetafdruk, en hiermee is de Bobath Elite uitermate geschikt voor de compacte behandelruimte

De bedieningen zijn gemakkelijk te vinden en eenvoudig in gebruik. Het systeem met twee, speciaal geproduceerde gasveren ondersteunen uw patiënt en zijn zeer licht verstelbaar.

Op zoek naar een grote en veelzijdige behandeltafel, dan is de Bobath Elite de beste keuze.

Productkenmerken Bobath Elite

Ook verkrijgbaar met langere, comfortabele rugleuning



Dubbel gasveer systeem onder hoofd-, of rugdeel

Standaard patiënten gewicht van maximaal 200kg

Alle modellen zijn uit te voeren met een rondomsysteem, waarmee de tafel in hoogte kan worden veresteld. De voetschakelaar en dus ook het losse snoer komen te vervallen.



Traploze en lichte verstelling van de gasveren is mogelijk door de hendels aan beide zijden van de tafel



Polstering 60mm zorgt voor veel comfort voor de patiënt.

Zeer eenvoudig te verplaatsen door centraal wielhefsysteem en wielen van 75mm



Met behulp van de verhogingset onderrijdbaar tot 17cm voor gebruik met patiëntenlift





Standaard voorzien van voetschakelaar



Grote ronde poten zijn voorzien voor uitdraibare doppen voorzien van antislip. Hierdoor staat de tafel zeer stabiel en voorkomt ongewenste bewegingen.

Bobath 1 Elite

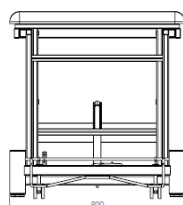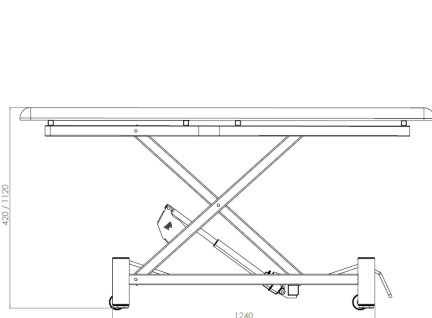

Hekken



Verhogingset



Purfect bekleding



Dikkere bekleding



rondomschakeling



Specificaties:

| | |
|----------------------|----------------|
| Maximale hefvermogen | 175kg |
| Maximale belasting | 350kg |
| Polstering | 60mm |
| Wielen | 75mm dubbelrol |




Producteigenschappen:

- Rechtstandige hoog/laag beweging
- Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem
- 1-delig ligvlak zonder sticknaden
- Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm
- Verkrijgbaar in de maten 90,100,110 of 120cm breed

Artikelcodes:

| | |
|----------------------|---------------|
| Electric adjustable | BOB2BE90/100 |
| Electric adjustable | BOB2BE110/120 |
| Hydraulic adjustable | BOB2BH90/100 |
| Hydraulic adjustable | BOB2BH110/120 |

Bobath 2 Elite Head Section

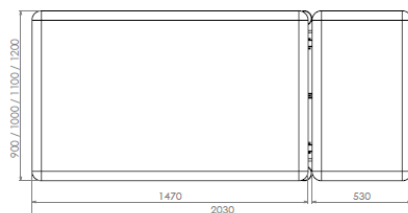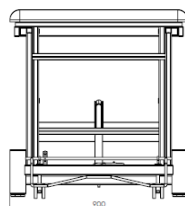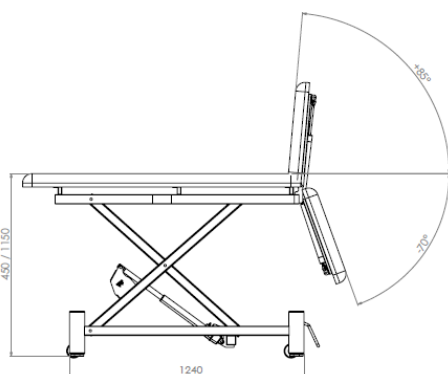


Hekken



Verhogingset



Purfect bekleding

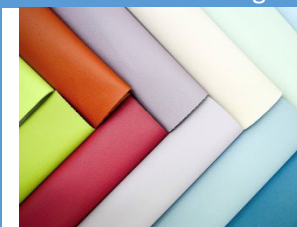

Neusgat



Rondomschakeling



Specificaties:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Maximale hefvermogen | 175kg |
| Maximale belasting | 350kg |
| Polstering | 60mm |
| Wielen | 75mm dubbelrol |
| Verstelling hoofddeel | 2 gasveren |

Producteigenschappen:

- Rechtstandige hoog/laag beweging
- Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem
- Hoofddeel kan ook negatief worden gepositioneerd
- Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm
- Uitbreid keuze mogelijkheid kleuren en accessoires

Artikelcodes:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Elektrisch verstelbaar | BOB2HE90/100 |
| Elektrisch verstelbaar | BOB2HE110/120 |
| Hydraulisch verstelbaar | BOB2HH90/100 |
| Hydraulisch verstelbaar | BOB2HH110/120 |

Bobath 2 Elite Back Section



Hekken



Neusgat






Purfect bekleding



Verhogingset



Rondomschakelaar

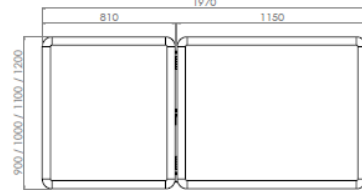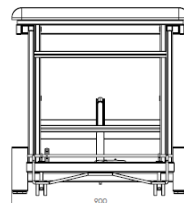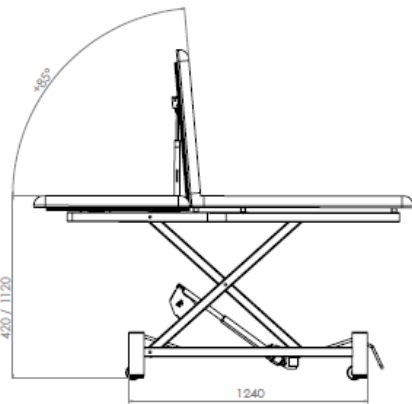

Specificaties:

| | |
|----------------------|----------------|
| Maximale hefvermogen | 175kg |
| Maximale belasting | 350kg |
| Polstering | 60mm |
| Wielen | 75mm dubbelrol |
| Verstelling rugdeel | 2 Gasveren |

Producteigenschappen:

- Rechtstandige hoog/laag beweging
- Standaard met wielen en centraal wielhefsysteem
- Comfortabele rugleuning van 81cm
- Dubbel gasveer systeem voor extra stabiliteit
- Unieke laagste stand 42cm en hoogste stand 112cm

Artikelcodes:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Elektrisch verstelbaar | BOB2BE90/100 |
| Elektrisch verstelbaar | BOB2BE110/120 |
| Hydraulisch verstelbaar | BOB2BH90/100 |
| Hydraulisch verstelbaar | BOB2BH110/120 |

Opties & Accessoires

De tafels uit de Bobath lijn zijn uit te voeren met verschillende opties en accessoires om het gebruiksgemak en het comfort te optimaliseren. Hieronder vindt u alle mogelijk opties. Let op dat een aantal opties alleen geschikt zijn voor een bepaald model, en dit zal dan ook vermeld staan. Daarnaast zijn diverse opties alleen te gebruiken in combinatie met een andere product, en ook dit zal dan vermeld staan.

| Omschrijving | Productcode | Afbeelding |
|---|-------------|---|
| Papierrolhouder | PAPBOE00 |  |
| Koppeling voor extra schakelaar | TSTUK00 |  |
| Extra handschakelaar, alleen te gebruiken met TSTUK00 | HSCH010 |  |
| Extra voetschakelaar, alleen te gebruiken met TSTUK00 | VSCH08 |  |
| Rondomschakeling | RANDOM10 |  |
| Houder voor voetschakelaar | ADAPVSCH00 |  |

| Omschrijving | Productcode | Afbeelding |
|--|-------------|---|
| Neusgat, incl. vulkussen | NEUS002 |  |
| Voetenmat | VOETENMAT |  |
| Purfect bekleding voor behandeltafel | PURFECT01 |  |
| Purfect bekleding voor kussens/krukjes | PURFECT02 |  |
| Dikkere bekleding 70mm | DIKKER00 |  |
| Traagschuim verwerkt in bekleding | LAZYFOAM00 |  |

| | | |
|--|-----------|---|
| Wegklapbare hekken | HEKKEN02 |  |
| Verhogingset, onderrijdbaarheid 17cm | VERHOGING |  |
| Anti-collision systeem | ACS 00 |  |
| Veiligheidsschakelaar voor behandeltafel | SPERRBOX |  |

| | | |
|---|-----------|---|
| Aardpotentiaal- vereffeningspunt | AARDP00 |  |
| Aardekabel | KABELAARD |  |
| Handschakelaar met veiligheidsschakelaar | VSCH011 |  |

Kleuren & leersoorten

Standaard worden de tafels afgewerkt met een kunstleer op basis van PVC uit de Fresh kleurenlijn. Er zijn 34 kleuren beschikbaar zonder extra kosten om de tafel af te kunnen stemmen met uw behandelruimte. Op deze manier creëert u een nog prettigere werkomgeving. Dit type kunstleer mag niet met alcohol worden schoongemaakt. Daarnaast hebben we de Purfect kleurenlijn op basis van PU en deze mag wel met alcohol worden gedesinfecteerd. Ook hier is weer een ruime keuze aan kleuren om ervoor te zorgen dat de tafel niet alleen functioneel is maar ook een lust voor het oog.

Op onze website vindt u meer informatie over deze leersoorten en het schoonmaken ervan. Ook is er een lijst beschikbaar met geschikte schoonmaakmiddelen. Vanuit Wesseling bieden wij ook schoonmaak- en desinfectie middelen aan, te weten Tevan Panox en de Soapopular.

Hieronder een greep uit het ruime assortiment kleuren (let op dat onderstaande afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren):

| Fresh | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Nero | Titanium | Atomium | Crystal |
|  |  |  |  |
| Marine | Ocean | Aqua | Pagode Blue |
|  |  |  |  |
| Teal | Ice Blue | Taupe | Lounge |
|  |  |  |  |
| Portobello | Bark | Zest | Grass |
|  |  |  |  |
| Sunrise | Orange | Citron | Lollipop |

| Purfect | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Black | Cold Lava | Concrete | Snow White |
|  |  |  |  |
| Iron | Majestic Blue | Babylon | Florence |
|  |  |  |  |
| Vintage Blue | Ice Blue | Pepper Mint | Kiwi |
|  |  |  |  |
| Cappucino | Peanut | Fudge | Cocos |
|  |  |  |  |
| Ginger | Henna | Mustard | Cranberry |